


ROZ®

— nothing compares! —

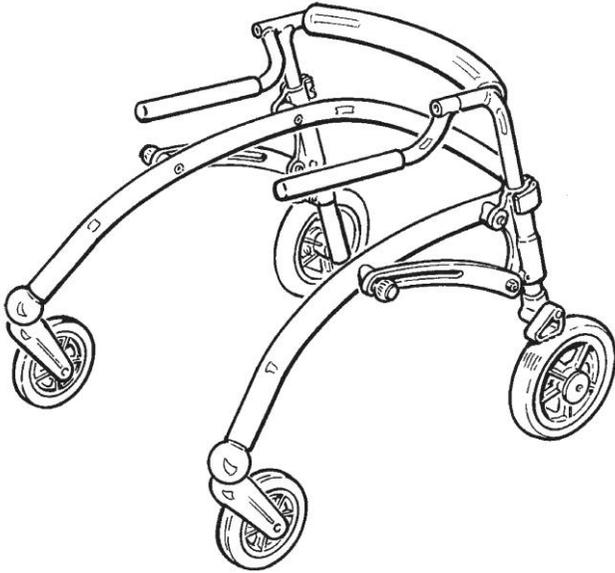

Crocodile

SHOWA
power your mission

昭和貿易株式会社

RO2®

*— nothing
compares!*

目次

安全性

保証

ツール

メンテナンス

トップフレーム

ハンドル

逆転防止ホイール

抵抗付キャスター

直進走行スタビライザー

転倒防止装置

シート

バックサポート

ヒップサポート

アームホルダー

スリングシート サイズ1, 2

折り畳み方法と輸送

製品識別

仕様

製品番号

保証書



CROCODILE

お買い上げ頂きありがとうございます。

ご期待に充分お応えできることを確信しております。

2歳から14歳のお子様の歩行訓練を目的とした商品です。

クロコダイルは自由に動けることを経験して頂くためにデザインされています。

お子様と共に楽しい時間を共有して頂けます。

このマニュアルによってクロコダイルの機能を最大限に活かすことができます。

このマニュアルをよく読んでご使用下さい。

RO2[®]

— nothing compares! —



<安全性>

クロコダイルは CEマークを取得しています。
これは、ヨーロッパのあらゆる安全規格に合致している
ことをしめしています。

注意！

もし安全上、特別な注意を要するなら、
このマニュアルに、注意書きがされています。

<保証>

クロコダイルの保証期間は1年です。
(特別な改造がされている場合は保証の対象外になります)

<ツール>

4mm と 6mm の六角レンチが付属しています。
クロコダイルの調整に使用します。

<メンテナンス>

クロコダイルは、特別なメンテナンスは要りませんが、
ハンドルの六角ネジとトップフレームのロック機構は
頻繁に締め直して下さい。
フレームは、常にきれいにしておいて下さい。

注意！ 塩素系の洗剤類は使用しないで下さい。



RO2[®]

— nothing compares! —

ADJUSTING THE TOP

トップフレームの調節

- 1) トップフレーム用のロック機構を開いて下さい。(A)
- 2) トップフレームを上下に調節して下さい。(B)
- 3) 再び、トップフレーム用のロック機構(A)を締めて下さい。

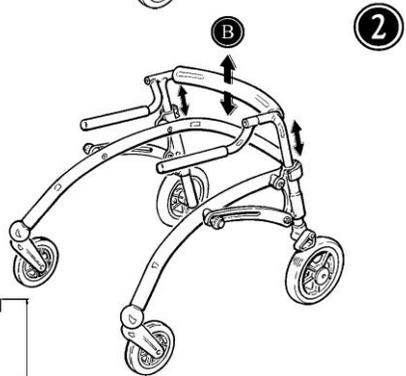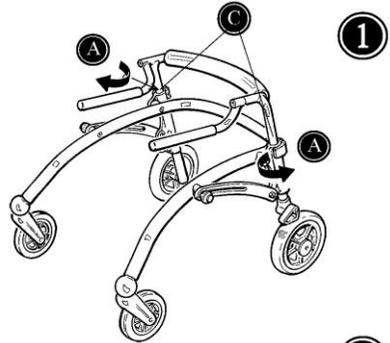


注意!

トップフレームを最高位置にする時は注意して下さい。


<最高位置>

- サイズ1：下から10cm
 - サイズ2：下から19cm
- より上げないで下さい。

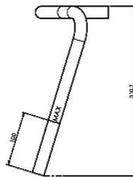

注意!

頻繁にトップフレーム用ロック機構を締め直して下さい。

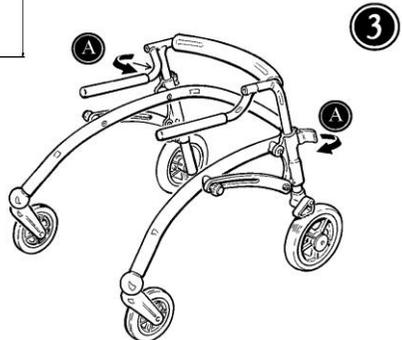

R82®


— nothing compares! —

ADJUSTING THE HANDLES


ハンドルの調節

- 1) 六角レンチ(A)を使って、六角ネジを緩めて下さい。
- 2) ハンドルを適切な位置に変えて下さい。(B)
- 3) 六角ネジを締めて下さい。(A)


①

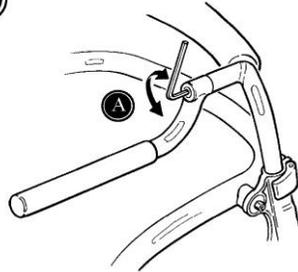

②

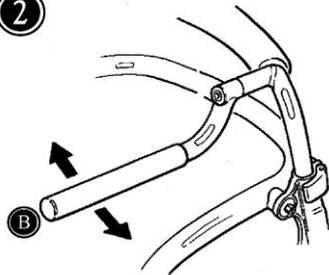

③

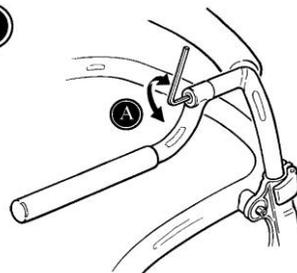

注意!

クロコダイルを再度使用する前に、六角ネジが、緩んでないか確認し使用中も確認して下さい。



ANTI-REVERSE WHEEL STOP 逆転防止ストッパー



- 1) 機能を有効にする方法。
安全ピン(A)を押しながら
バックストッパー(B)を倒して下さい。
逆転防止ホイールが有効になります。
- 2) 機能を無効にする方法。
安全ピン(A)を押しながら
バックストッパー(B)を起こして下さい。
逆転防止ホイールが無効になります。

注意！

ご使用前に下記の点をご確認ください。

- ① ストッパーが正しく作動するか。
- ② ストッパーがフレームにしっかりと固定されているか。(フレームへの固定部分が上下や左右に動かないか)

ストッパーが正しく作動しない、固定部分がしっかりと固定されていない場合は、転倒の恐れがございますので、直ちに使用を中止し、販売店へご連絡下さい。

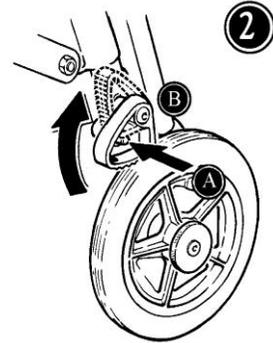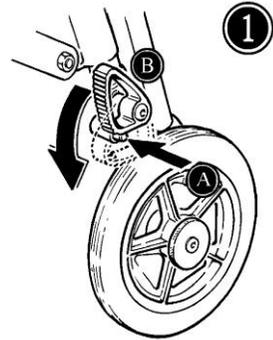

DRAG WHEEL


抵抗付きキャスター

1) 機能を有効にする方法。
(A)の六角ネジを緩めて、
ノブを右にまわしてゆくと
抵抗がかかってきます。
適当なところで六角ネジを
締めて下さい。

2) 機能を無効にする方法。
(A)の六角ネジを緩めて
ノブを左にまわしてゆくと
抵抗がかからなくなります。
適当なところで六角ネジを
締めて下さい。

注意！

お子様の前進速度は抵抗付きキャスター
で、調節出来ます。

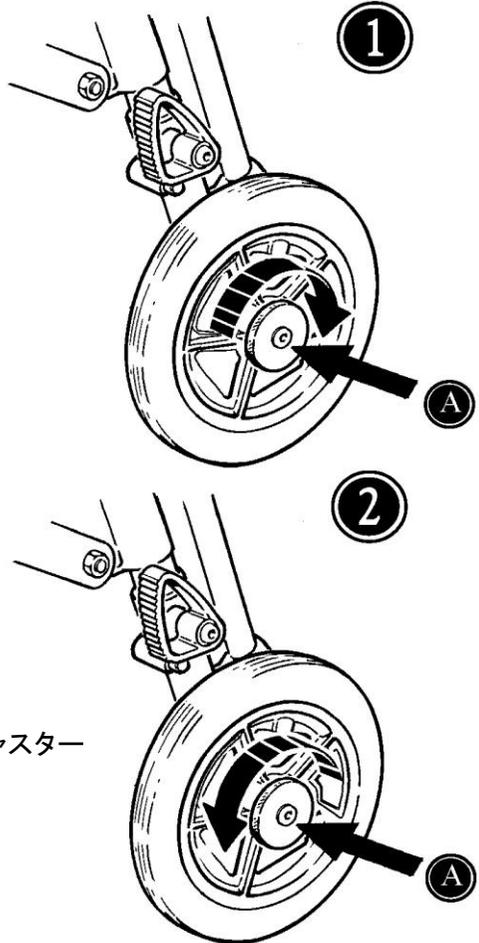

RO2[®]

— nothing compares! —




FRONT WHEELS WITH DIRECTIONAL STABILIZERS

前輪の直進走行スタビライザー

通常、前輪は自在車で、直進ロックによって直進のみに切り替えが可能です。

- 1) 直進走行スタビライザーを有効にするにはボタンを引っ張り(A)、右にまわして下さい(B)。定位置でボタンを放し(C)固定させて下さい。直進走行スタビライザーが有効になります。

- 2) 直進走行スタビライザーを無効にするにはボタンを引っ張り(A)、左にまわして下さい(B)。定位置以外でボタンを放して下さい(C)。直進走行スタビライザーが無効になることにより、自由な方向に進めます。

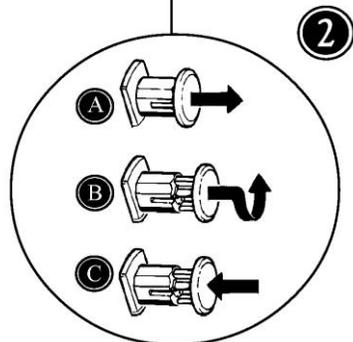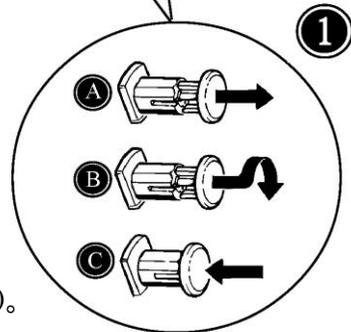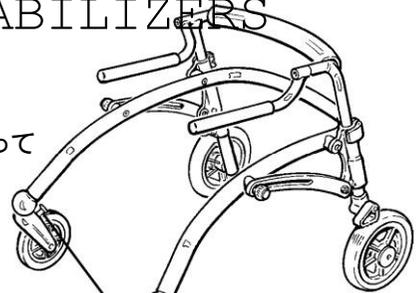

RO2[®]

— nothing compares! —

ANTI - TIP

スイングアウェイ アンチチッパー

機能を有効にする方法。

- 1) 安全ピンがカチッと音がするまで
転倒防止装置を下にまわして下さい。

機能を無効にする方法。



- 2) 安全ピンを押して、転倒防止装置を上
にまわして下さい。

取り付け方法。

- 3) 本体のカバープラグ(C)を取り外して
下さい。
転倒防止装置を六角ネジ(D)を締めて
取り付けます。

注意！

安全ピンポイント(E)が沈むことが重要です。
転倒防止装置を締める前にスプリングが外の
安全ピンを動かしているか確認して下さい。

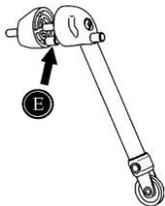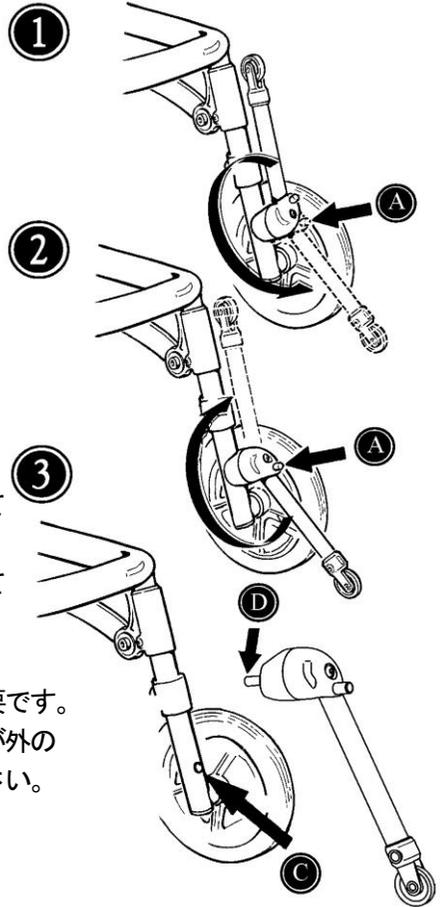



SEAT

シート

1-2) 取り付け方法。

クロコダイルの正面に向かい取り付けます

付属の六角ネジ(A)を両フレームの六角ネジと交換して下さい。

シートの左部分から取り付けて下さい。


ボールつまみを引っ張り下げ(B)、シートを設置して下さい。

シートの左部分を付けたまま、(C)を設置します。

! シートの裏の止めネジが締まっているか確認して下さい。

3) フリップアップシート(D)

もしお子様がシートを使わない場合は収納できます。

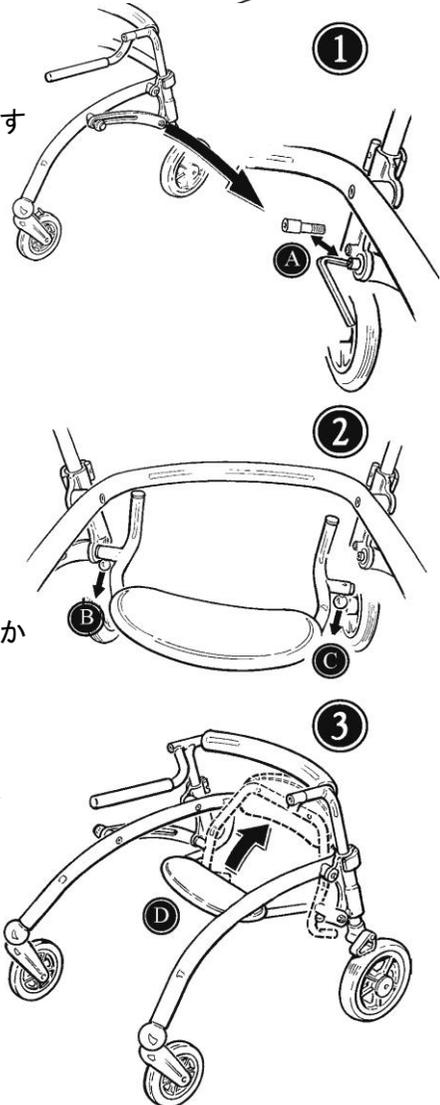

R82[®]


— nothing compares! —

BACK SUPPORT

バックサポート

トップフレームにバックサポートを取り付けます。

- 1) トップフレームからパッドを取り外します。
 - ・ジッパー(A)を開いてトップフレームのパッドを取り外して下さい。
- 2) ツールバックから六角レンチを使ってバックサポート取り付け金具のネジを緩めて下さい。
- 3) トップフレームにバックサポートを合わせて下さい。
- 4) 取り付け金具のネジを締める前に位置を調節して下さい。

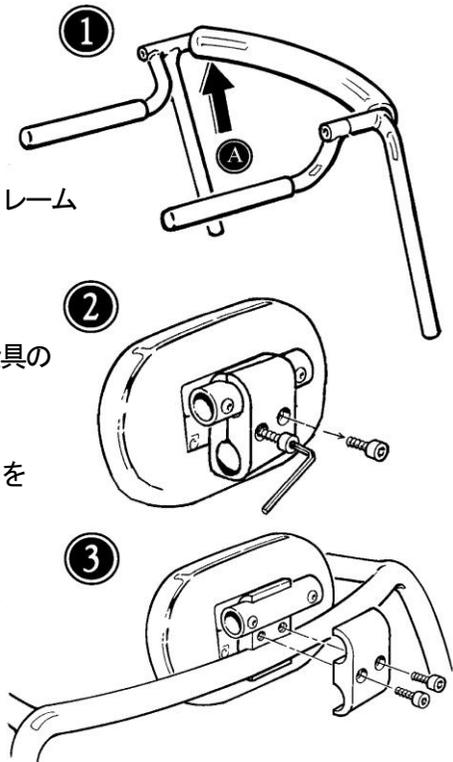



HIP SUPPORTS

ヒップサポート

取り付け方法。


- 1) お子様のヒップのサポートができるあたりに
トップフレームとヒップサポートバーを
合わせて下さい。(A)

高さ：角度：奥行きの調節方法。

- 2) 取り付け金具を締める前にヒップサポートの
高さを調節して下さい。(B)
- 3) ヒップサポートの角度(C)をお子様の
ヒップのサポートができる位置で
調節して下さい。
- 4) ヒップサポートの奥行き調節も同様に
行って下さい。(D)

注意！

クロコダイルを使用される前に必ず
ネジのチェックを行って下さい。

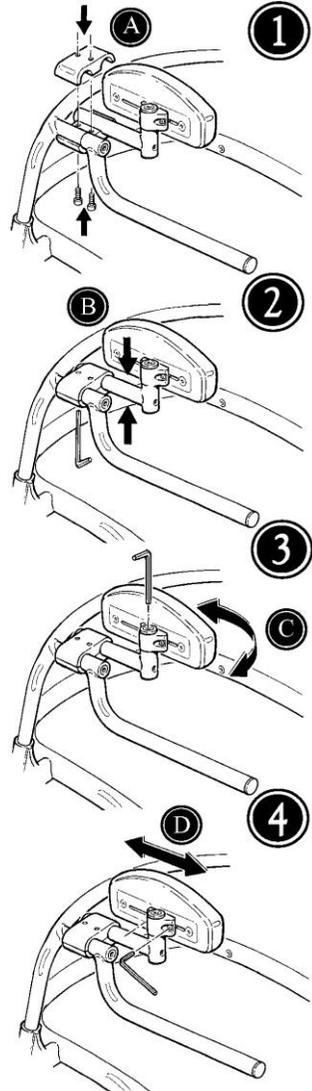

RO2[®]

— nothing compares! —

FOREARM SUPPORT WITH HANDGRIP

アームホルダー

取り付けと調節方法。

1) ハンドル(A)を六角レンチで取り外して下さい。





2) アームホルダーを取り付け、六角レンチで締めて下さい。奥行きを調節して、六角ネジ(B)を締めて下さい。

3) アームホルダーの角度調節をする為には、器具の底のノブネジ(C)をまわして下さい。

4) アームホルダーの横にあるノブネジ(D)を緩めて、グリップの角度と前後位置を調節して下さい。

注意！

アームホルダーの調節ネジをこまめにチェックして下さい。

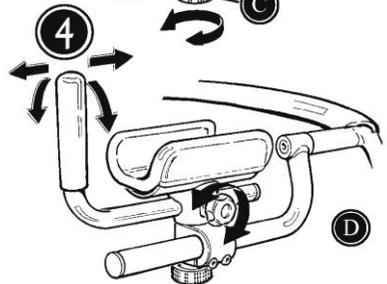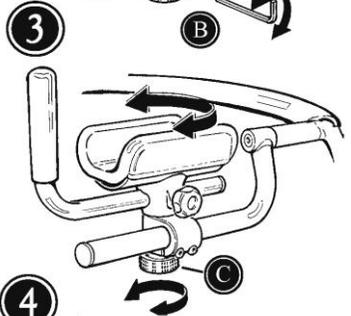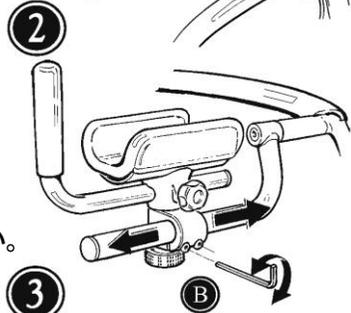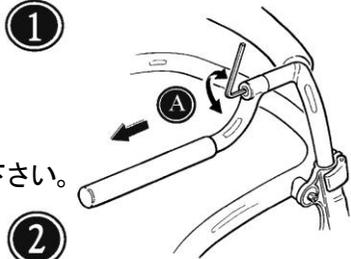


R82[®]

— nothing compares! —

SLING SEAT SIZE 1

スリングシート サイズ1

- 1) トップフレーム(A)のあたりにスリングシートのバックストラップを取り付けて下さい。
- 2) フロントストラップをハンドルに取り付けて下さい。(B)
- 3) スリングシートの両側(C)を開いてお子様をスリングシートに座らせ、閉じて下さい。
- 4) スリングシートの裏側の安全ベルトを締めて下さい。(D)
- 5) バックル(E)でシートの高さ調節して下さい。

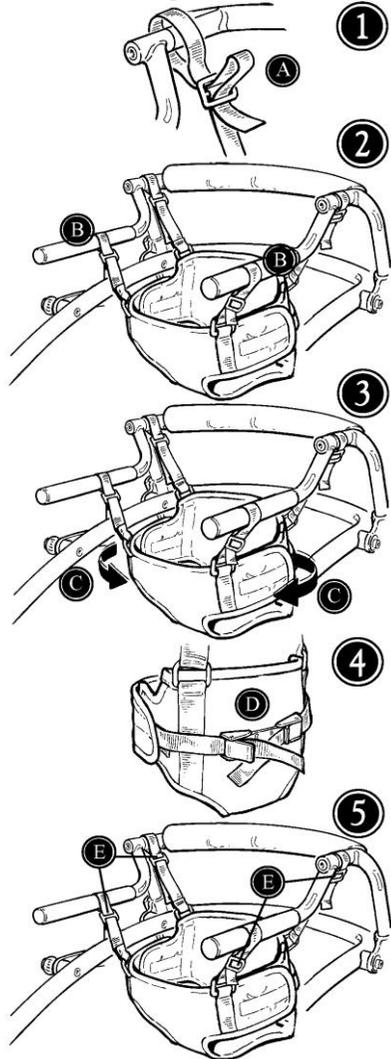

R02[®]


— nothing compares! —

SLING SEAT SIZE 2


スリングシート サイズ2

- 1) トップフレーム(A)のあたりにスリングシートのバックストラップを取り付けて下さい。
- 2) フロントストラップをハンドルに取り付けて下さい。(B)
- 3) スリングシートの両側(C)を開いてお子様をスリングシートに座らせ、閉じて下さい。
または、スナップファスナー(D)を開き、お子様を座らせてから、再びスナップファスナーを閉じて下さい。
- 4) スリングシートの裏側の安全ベルトを締めて下さい。(E)
- 5) バックル(F)でシートの高さ調節して下さい。


①

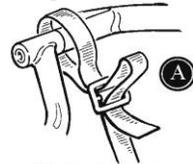

②

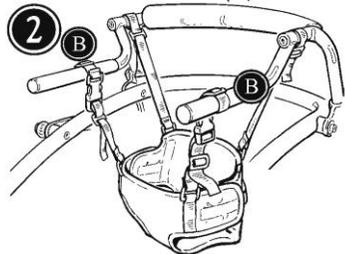


③

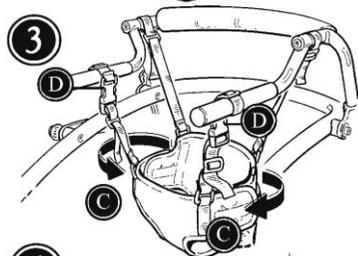

④



⑤

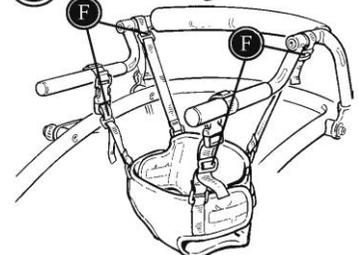



FOLDING AND TRANSPORTATION


折り畳み方と輸送方法

クロコダイルの折り畳み方

- 1) トップフレーム用ロック機構(A)を開いて、トップフレーム(B)を取り外して下さい。
- 2) クロコダイルのボールつまみを緩めて下さい。(C)
- 3) 前輪フレームを持ち上げ、前に押し倒す事によって折り畳めます。(D)

輸送方法と保管方法

- 4) クロコダイルを折り畳んで、トップフレームを(E)のように置いて下さい。

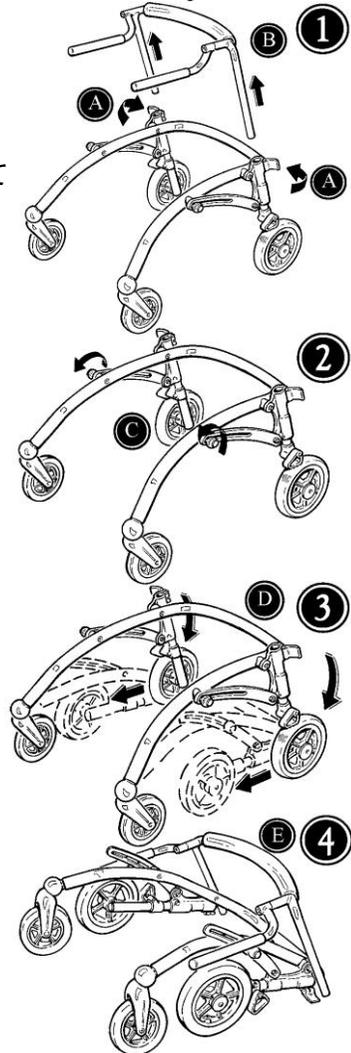




PRODUCT IDENTIFICATION

製品識別


A) シリアルナンバー
ラベルは右前キャストターのすぐ上のフレームにあります。

B) 製造元
ラベルは左前キャストターのすぐ上のフレームにあります。

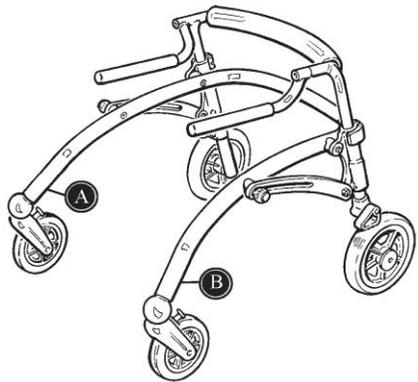

R82[®]

nothing compares!

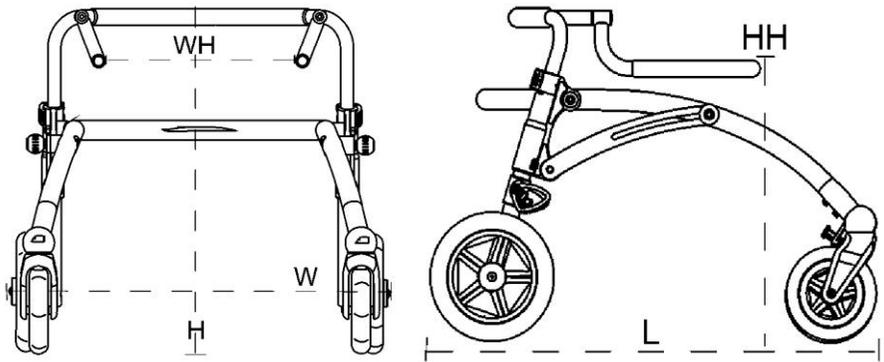

クロコダイルの仕様

	サイズ1	サイズ2
床からトップフレームまでの高さ(H)	49-66cm	65-82cm
最大全幅(W)	62cm	69cm
全長(L)	72cm	84cm
ハンドル幅(WH)	27-55cm	32-60cm
床からハンドルまでの高さ(ダウンポジション)(HH)	42-56cm	55-69cm
折り畳み時の長さ(L F)	72cm	86cm
折り畳み時の高さ(H F)	31cm	27cm
最大適用身長	115cm	150cm
耐荷重	30kg	45kg
重量	5.5kg	6.5kg

製品番号

	サイズ 1	サイズ 2
クロコダイル(本体)標準仕様	86801	86802
標準仕様：後輪抵抗付きキット、バックストッパー、前輪直進ロックが装備されています。		
アームホルダー	86858	86859
スイング・アウェイ アンチチッパー	86815	86815
バックサポート	86816	86816
バックサポート (サイドサポート付)	86808	86809
ヒップサポート	86819	86819
シート	86820	86821
スリングシート	86824	86825
ハンドルノブ	86861	86861
後輪抵抗付きキット	86827	86827
バックストッパー	86828	86828
前輪直進ロック	86829	86829

保証書 [お客様控え]

型番 86801 ・ 86802
品名 CROCODILE (クロコダイル)

フリガナ

〒

ご住所

フリガナ

ご氏名

ご購入年月日 年 月 日

- 1.本製品が取扱説明書の注意書きに従って、正常な使用状態で、故障した場合には、本書記載内容に基づき、ご購入から満1年間無料修理致します。
- 2.本保証規定に基づく修理をご希望の際には、下記のお買上げ店へ保証書を添えてお申し出下さい。
尚、お買上げ店にご持参して頂くに際しての諸費用はお客様にご負担願います。
- 3.次の場合は、上記の期間内でも保証の対象となりません。
 - ①使用上の誤り(使用説明書以外の誤操作)により生じた故障。
 - ②当社の指定する修理取扱所以外で行われた修理による故障。
 - ③火災・天災・地震等により生じた故障。
 - ④浸水・落下・とげ・砂等により生じた故障。
 - ⑤保管上の不備や手入れの不備等による故障。
 - ⑥販売店名・ご購入年月日等の記入無き場合、または記載事項を訂正された場合。
 - ⑦本製品を改造された場合。
- 4.本保証書は紛失されても再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

販売店名・住所

SHOWA
power your mission

昭和貿易株式会社

SHOWA 昭和貿易株式会社
power your mission

東京 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目10番5号 6F

ヘルスケア営業部

TEL : (03) 5822-1385 FAX : (03) 5822-1396

本社 〒550-0002 大阪府西区江戸堀1丁目18番27号

ヘルスケア営業部

TEL : (06) 6441-5612 FAX : (06) 6444-6006

<http://www.showa-boeki.co.jp/>